

## HUMIDIFICADO REUTILIZÁVEL NEBAL

### MODELO

NEBAL

### NORMAS E LEGISLAÇÃO DE REFERÊNCIA

- Em conformidade com o Regulamento nº745/2017
- Em conformidade com a norma EN ISO 9170-1

### REFERÊNCIAS DOS DISPOSITIVOS MÉDICOS

- **FABRICANTE:** Air Liquide Medical System
- **CERTIFICAÇÃO CE:** Classe IIa
- **REF. FABRICANTE:** KP0XXXXX

### DESCRIÇÃO

O humidificador NEBAL destina-se a humedecer o oxigênio ou ar medical. Este dispositivo médico, associado a um debitómetro, permite humidificar por micro-bolhas o Oxigênio ou o Ar Medicinal administrado ao paciente em caso de uma posologia longa e/ou de um débito elevado.

### CONFIGURAÇÃO

Pressão de alimentação: ligeiramente superior à pressão atmosférica

Pressão máxima, sem qualquer risco de reventamento : 5 bar

- Fluxo máximo: 15 lt/min.

- Humidificação: 3 mL (H 2O)/h a 4 L/min. ( $\pm 20\%$ ).

- Humidificação: 9 mL (H 2O)/h a 4 12 L/min. ( $\pm 20\%$ ).

- 2 tipos de roscas dos parafusos: 12x125 e 9/16".

- Perda de carga: < 0,1 bar à 15 L/min.


- Temperatura de armazenamento compreendida entre -20°C e +60°C.

- Temperatura de utilização compreendida entre 0 e 45°C.


- Difusor e tubo devem ser mudados sempre que ocorra limpeza/desinfecção.

**DIMENSÕES:** 175 x 78 mm

**PESO:** 175 g.

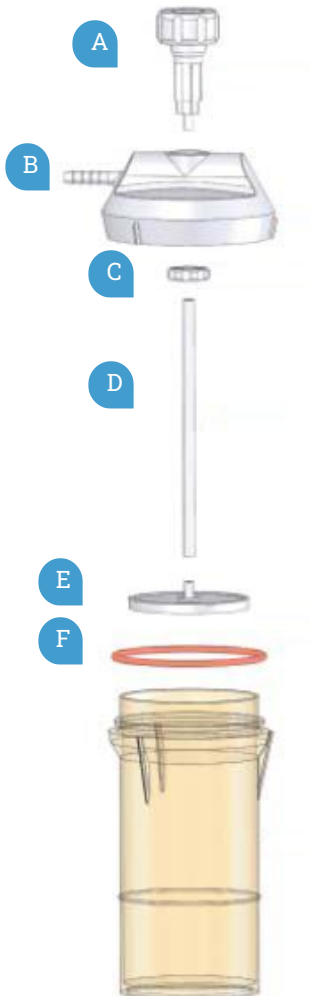

## COMPONENTES HUMIDIFICADOR NEBAL

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	GÁS	UND. VENDA	LEGENDA
6075	DIFUSOR P/NEBAL-2 (x10)	O2	10	
168351	JUNTA TORICA FRASCO NEBAL N/MOD YJ041700 (x10 und)	O2	10	-
6304	TAMPA NEBAL 2 (x5 und)	O2	5	
6301	CONJUNTO ATRAV+ECROU NEB 2	O2	1	 
6067	KIT NEBAL 2 PARA GARRAFA COMPACT	O2	1	-
170743	JUNTA FRASCO NEBAL II	O2	1	
6830	TUBO SILICONE 3x5 NEBAL 2 (x10 und)	O2	1	

## GAMA PRODUTOS (CONFIGURAÇÃO STANDARD)

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	GÁS	TIPO SAÍDA
11831	HUMIDIFICADOR NEBAL 2 - M12X125	O2	12x125
35294	HUMIDIFICAOR NEBAL 2 - M 9/16	O2	9X16

## ACESSÓRIOS

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	GÁS	TIPO SAÍDA	UND. VENDA	REFº FT
168302	OLIVA SAÍDA 12x125 (x10)	-	12x125	10	FT034A - PT
168301	OLIVA SAÍDA 9/16 (x10)	-	9X16	10	FT034A - PT
35342	RACOR F12/125 A M9/16 KY383800	-	-	1	FT034A - PT
168234	RACOR INTERMÉDIO PLASTICO 12X125 A 9/16 (x10)	-	-	10	FT034A - PT
198724	RACOR M12X125 A 9/16	-	-	1	FT034A - PT
198725	RACOR 9/16 A M12X125	-	-	1	FT034A - PT